


**PART A**  
PARTIE A

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Instructional Video  
Guide Vidéo  
[bit.ly/canshieldppe](https://bit.ly/canshieldppe)


**Shield Parts / Pièces du bouclier**

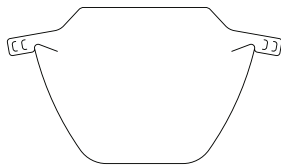


Shield / Bouclier



Head Strap / Sangle de tête

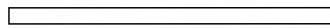


Elastic Band / Bande Élastique

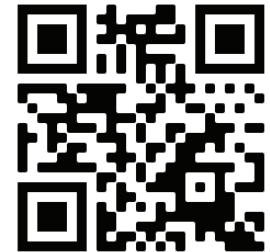


**Step 1: Inspect & Disinfect** - Use either a) alcohol based sanitizer/wipes, b) Benzalkonium Chloride or Hydrogen Peroxide containing cleaners\*, or c) 10:1 diluted sodium hypochlorite bleach solution (for 1 minute), wipe down both sides of all parts.

**Étape 1: Inspect et désinfect** - Utilisez soit un a) désinfectant ou lingette à base d'alcool, b) les nettoyeurs à base chlorure de benzalkonium ou peroxyde d'hydrogène\*, ou c) solution à base hypochlorite de sodium diluée au 10:1, (pour une minute) essuyé tous les côtés de toutes les pièces.

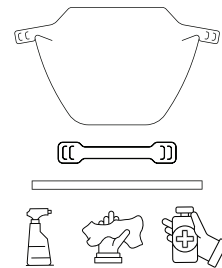


**Step 2: Assemble** - Wearing gloves, insert the left tab of the Shield into one of the slots on the left side of the Head Strap. Repeat this step with the right tab of the Shield and right side of the Head Strap.

**Étape 2 : Assembler** - En portant des gants, insérez l'onglet gauche du bouclier dans l'une des fissures sur le côté gauche de la sangle de tête. Répétez cette étape avec l'onglet droit du bouclier et le côté droit de la sangle de tête.

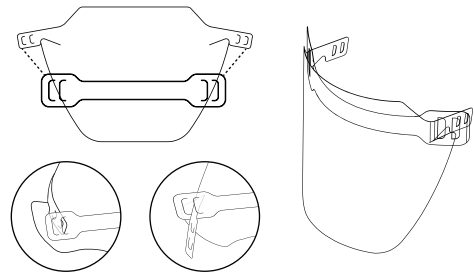

**Step 3: Attach Elastic** - Locate the Elastic Band and weave it through the two slots on the Shield's tabs, from the inside slot to the outside. Repeat this step on the opposite side. Pull the ends of elastic band to tighten.

**Étape 3 : Attacher la bande élastique** - Localisez la bande élastique et insérez-la à travers le deux fissures sur les onglets du bouclier en ayant de la fissure intérieure à l'extérieur. Répétez cette étape dans l'autre côté. Tirez les bouts de la bande élastique pour la serrer convenablement.

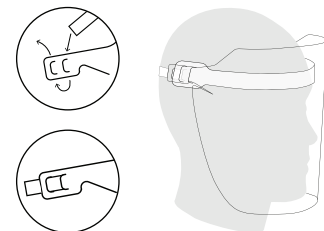

\* Please read and follow the instructions labelled on each cleaning product and always use approved disinfectants from: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html>


\* S'il vous plaît lire et suivre les instructions l'étiquetée sur chaque produit de nettoyage et toujours utilisez les désinfectants agréés de: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html>

**PART B**  
PARTIE B

**SANITIZING INSTRUCTIONS**  
INSTRUCTIONS DE DÉSINFECTION


**Step 1: Disassemble** - Wearing gloves, disassemble your Shield, in the reverse order of the Assembly Instructions.

**Étape 1 : Démontez** - En portant des gants, démontez le bouclier dans l'ordre inverse des instructions d'assemblage.

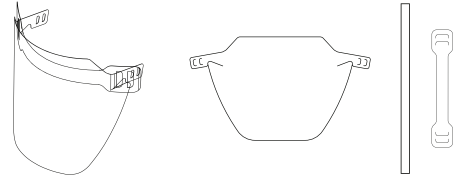

**Step 2: Clean** - Using soap and warm water in a basin or sink, soak all parts of the Shield to remove any organic residue. (If the Shield will not be immediately reused, they can remain soaking indefinitely.)

**Étape 2 : Nettoyer** - En utilisant du savon et de l'eau chaude dans un bassin ou dans un évier, imprégnez toutes les parties du bouclier pour enlever les déchets organiques (Si le bouclier ne sera pas immédiatement réutilisé, il peut rester imprégné indéfiniment).

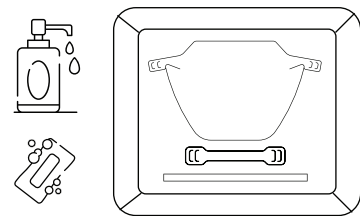


**Step 3: Disinfect** - Dry plastic parts with cloth or paper towel. Use either a) alcohol based sanitizer/wipes, b) Benzalkonium Chloride or Hydrogen Peroxide containing cleaners\*, or c) 10:1 diluted sodium hypochlorite bleach solution (for 1 minute), wipe down both sides of all parts.

**Étape 3 : Désinfecter** - Séchez les pièces en plastique avec un tissu ou un essuie-tout. Utilisez soit un désinfectant/lingette à base d'alcool, b) les nettoyeurs à base chlorure de benzalkonium ou peroxyde d'hydrogène\*, ou c) solution à base hypochlorite de sodium diluée au 10:1, (pour une minute) essuyé tous les côtés de toutes les pièces.



**Step 4: Dry & Store** - Store Shield in a sanitary environment, in a disassembled state until next use. Prior to next use, please refer to "Part A - Assembly Instructions" on reverse side.

**Étape 4 : Sécher et stocker** - Déposez le bouclier dans un environnement sanitaire dans un état démonté jusqu'à la prochaine utilisation. Avant l'utilisation suivante, veuillez regarder les instructions de la « Partie A » au verso.

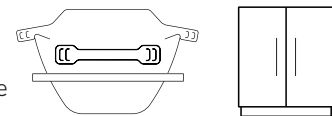

Disclaimer: Personal protective equipment (PPE) is the last line of defense for protection against hazardous liquids, including airborne pathogens. It is not a substitute for more effective control methods and should be used only as a secondary measure of protection, not as the primary source. The Canadian Shield offers face and eye protection, however, it does not guarantee protection against infection, illness, disease or COVID-19. Therefore, there are no claims, representations or warranties, whether expressed or implied as to the safety of The Canadian Shield.

\* Please read and follow the instructions labelled on each cleaning product and always use approved disinfectants from: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html>

\* S'il vous plaît lire et suivre les instructions l'étiquetée sur chaque produit de nettoyage et toujours utilisez les désinfectants agréés de: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html>